

Rozwiązanie Van Giesona


Opis:

Roztwór Van Giesona przeznaczony jest do stosowania w histologicznej wizualizacji kolagenu w skrawkach tkanek. Ten odczynnik jest używany w wielu specjalnych procedurach barwienia, w tym w zestawie do barwienia koloidalnego żelaza i zestawie do barwienia elastycznego (zmodyfikowany Verhoff's).

Kolagen:	Czerwony
Włókna mięśniowe:	Żółty
Cytoplazma:	Żółty

Zastosowania/ograniczenia: Nie należy przyjmować wewnątrznie.
Wyłącznie do diagnostyki in vitro.
Zastosowania histologiczne.
Nie używać, jeśli odczynniki stają się mętne.
Nie używaj przeterminowanej daty ważności.
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikami.
Niesterylne.

Tkanka kontrolna: Płuco
Macica
Mięsień
Nerka

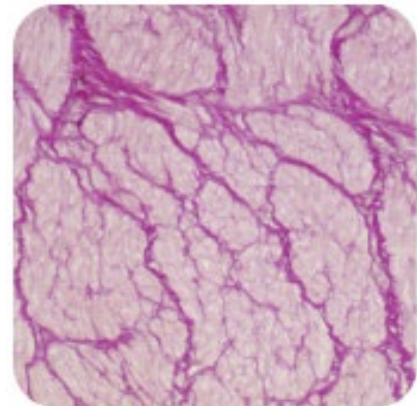

Informacje dotyczące zamawiania i aktualne ceny w
www.scytek.com

Dostępność:	Przedmiot #	Główność
	VGS125 powiedział:	Pojemność 125 ml
	VGS500 powiedział:	Pojemność 500 ml
	VGS999 powiedział:	Pojemność 1000 ml


Składowanie: Przechowywać w temperaturze 18-25°C.

Środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Działa szkodliwie po połknięciu.
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

Procedura:

1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody destylowanej.

Przechowywanie: 18°
C 25° C

 Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
Stany Zjednoczone Ameryki



EmergoEurope (31)(0) 70 345-
8570
ul. Molsstraat 15
2513 BH Haga, Holandia

Sposób stosowania VGS-IFU


Data aktualizacji: 29


Rewizja: 3

Strona 2 z 2

P.O. Box 3286 - Logan, Utah 84323, U.S.A. - Tel. (800) 729-8350 - Tel. (435) 755-9848 - Fax (435) 755-0015 - www.scytek.com

2. Zastosuj odpowiedni roztwór Van Giesona, aby całkowicie pokryć przekrój tkanki i inkubować przez 1 minutę.
3. Spłucz szkielko alkoholem bezustannym.
4. Odwodnić w 2 przemianach alkoholu absolutnego, klarować i zamontować w żywicy syntetycznej.

Przechowywanie: 18°
C  25° C



Laboratoria ScyTek, Inc.
205 Południe 600 Zachód
Logan, UT 84321
Stany Zjednoczone Ameryki

CE 

EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-
8570
ul. Molsnstraat 15
2513 BH Haga, Holandia