


## Roztwór eozyny Y (modyfikowany alkoholik)

**Opis:** Roztwór eozyny Y (zmodyfikowany alkoholik) jest przeznaczony do stosowania w zastosowaniach histologicznych i cytologicznych. Ta nowo opracowana Eosin zapewnia korzyści tradycyjnej formuły alkoholowej ze znaczną poprawą użyteczności. Zalety to mniejsza szybkość parowania, lepsze wzory kolorystyczne, zmniejszona tendencja do rozlewania się po pojemniku, rękach i blatach oraz lepsze napięcie powierzchniowe, które pozostaje na sekcji tkanki.

Cytoplazma: Jasnoróżowy  
Kolagen: Różowy  
Mięsień: Różowy/Różowy  
Erytrocytów: Różowy/Czerwony

**Zastosowania/ograniczenia:** Nie należy przyjmować wewnątrznie.  
Wyłącznie do diagnostyki in vitro.  
Zastosowania histologiczne.  
Nie używać, jeśli odczynniki stają się mętne.  
Nie używaj przeterminowanej daty ważności.  
Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z odczynnikiem.  
Niesterylnie.


**Tkanka kontrolna:** Każdy dobrze utrwalony wycinek tkanki zatopiony w parafinie lub zamrożony.  
Rozmaz komórkowy.

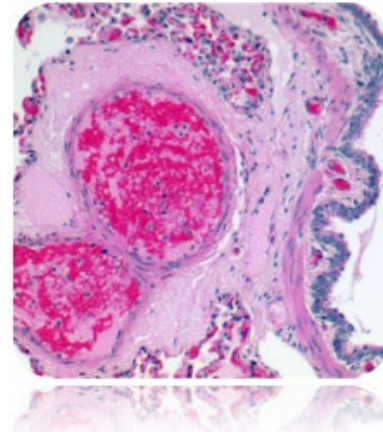


Informacje dotyczące zamawiania i aktualne ceny w [www.scytek.com](http://www.scytek.com)

Dostępność:	<u>Przedmiot #</u>	<u>Głośność</u>
	Zobacz materiał EYB500	Pojemność 500 ml
	EYB999 powiedział:	Pojemność 1000 ml
	EYB3800	1 galon

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu ze skórą i oczami.  
Łatwopalny.  
Działa szkodliwie po połknięciu.  
Przestrzegaj wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

Przechowywanie: 18° C  25° C

 Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
Stany Zjednoczone Ameryki





EmergoEurope (31)(0) 70 345-  
8570  
ul. Molsstraat 15  
2513 BH Haga, Holandia

## Procedura:

1. W razie potrzeby odparafinować skrawki i uwodnić do wody destylowanej.
2. Zanurz szkiełko w absolutnym alkoholu i zetrzyj nadmiar.
3. Zastosuj odpowiedni roztwór eozyny Y (zmodyfikowany alkoholik), aby całkowicie pokryć wycinek tkanki do nadmiaru i inkubować przez 2-3 minuty.
4. Spłucz szkiełko alkoholem bezustannym.
5. Odwodnić szkiełko w 3 przemianach alkoholu bezwodnego.
6. Przezroczysty suwak i montaż w żywicy syntetycznej.

## Odwołania:

Przechowywanie: 18°  
C  25° C



Laboratoria ScyTek, Inc.  
205 Południe 600 Zachód  
Logan, UT 84321  
Stany Zjednoczone Ameryki

CE 

EC REP

EmergoEurope (31)(0) 70 345-  
8570  
ul. Molsnstraat 15  
2513 BH Haga, Holandia