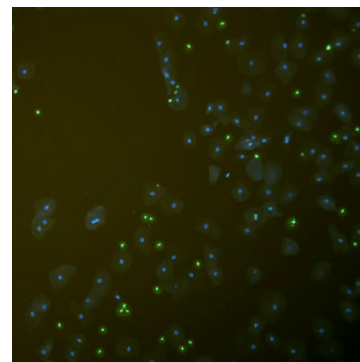


FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set)

La description: FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) est un support soluble dans l'eau conçu pour lamelles semi-permanente des préparations de diapositives fluorescentes. FluoreGuard sèche à une couche semi-rigide qui élimine les dommages des tissus par des lamelles mobiles et facilite le stockage à long terme. Le (Hard Set) formulation fournit un meilleur séchage dans des conditions humides.

Utilise / Limitations: Ne pas avaler.
 Pour diagnostic in vitro utiliser.
 applications histologiques.
 Ne pas utiliser si réactifs deviennent troubles.
 Ne pas utiliser la date d'expiration passé.
 Faites preuve de prudence lors de la manipulation des réactifs.
 Non stérile.



Informations de commande Prix actuel au www.scytek.com

Disponibilité:	<u>Article #</u>	<u>Le volume</u>
	FMH030	30ml Flacon compte-gouttes
	FMH060	60ml Flacon compte-gouttes
	FMH500	500ml
	FMH999	1000ml

Espace de rangement: Stocker à 18-25 ° C.

Précautions: Eviter le contact avec la peau et les yeux.
 Nocif en cas d'ingestion.
 Suivez tous les fédéral, État, et les réglementations locales en matière d'élimination.


Procédure:

1. Appliquer plusieurs gouttes de FluoreGuard Mounting Medium (Hard Set) et lamelle.
2. Permettre FluoreGuard à sécher pendant 30 minutes avant l'affichage. Le produit sera sec à une forme semi-solide du jour au lendemain.
3. FluoreGuard est un milieu à base aqueuse et peut être éliminée par trempage dans du PBS pendant une nuit.

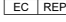
Les références:

1. Wanninger S, Donati M, Di Francesco A, Hässig M, Hoffmann K, Seth-Smith HM, Marti H, Borel N. Selective Pressure Promotes Tetracycline Resistance of Chlamydia Suis in Fattening Pigs. PloS one. 2016 Nov 28;11(11):e0166917.

Storage: 18° C  25° C

 ScyTek Laboratories, Inc.
 205 South 600 West
 Logan, UT 84321
 U.S.A.


 Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague, The Netherlands